

СВЕТОВОД С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ДИФФУЗОРОМ «РИНГ»

ФЛЕБОЛОГИЯ

ЭВЛК малой и большой подкожной вены
нижних конечностей




- Радиальная форма лазерного излучения
- Сварное соединение колбы и световодного волокна
- Специальный состав оболочки для лучшего скольжения
- Маркировка на внешней оболочке с интервалом в 1 см
- Диаметр колбы 1,8 мм (6 Fr) или 1,5 мм (14 G)

СВЕТОВОД С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ДИФфуЗОРОМ «РИНГ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина световодного инструмента	2,5 м
Диаметр кварцевой сердцевины	600 мкм
Диаметр колбы	1,8 мм (6 Fr)
	1,6 мм (14 G)
Длина волны лазерного излучения	от 970 до 1940 нм
Числовая апертура	До 0,37
Потери энергии лазерного излучения	менее 2%
Угол конуса лазерного излучения	60° от оси светопроводящего волокна
Тип разъема	SMA 905

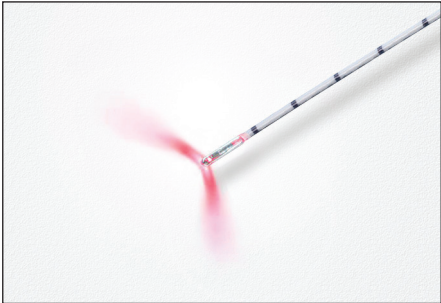

СОВМЕСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Лазерный хирургический аппарат «ЛАХТА-МИЛОН», а также отечественные и зарубежные медицинские лазеры, оснащенные оптическим разъемом SMA-905.

Флебологический световод является инструментом однократного применения. При многократном использовании возможно разрушение капилляра во время процедуры ЭВЛК. Производитель не несет ответственности за последствия многократного использования световода.



Группа компаний МИЛОН
разработка, производство, обучение тел. +7 (812) 9-700-900 info@milon.ru

ООО «Фокон» Санкт-Петербург